DEEPCARE

KIT À DOMICILE

GI MAP

Le GI MAP réunit la recherche de matériel génétique de micro-organismes et des mesures de santé intestinale dans les selles. Vous recueillez l'échantillon chez vous avec le matériel fourni, puis l'envoyez au laboratoire. Le bilan personnalisé écrit est inclus.

PRIX	DÉLAI	PRÉLÈVEMENT
CHF 399	21 jours	Selles

CE QUE LE KIT MESURE

85 marqueurs

Le GI MAP réunit la recherche de matériel génétique de micro-organismes et des mesures de santé intestinale dans les selles. Vous recueillez l'échantillon chez vous avec le matériel fourni, puis l'envoyez au laboratoire. Le bilan personnalisé écrit est inclus.

Bactéries pathogènes	Campylobacter · C. difficile, toxine A · C. difficile, toxine B · E. coli entérohémorragique · E. coli O157
Pathogènes parasitaires et viraux	Cryptosporidium · Entamoeba histolytica · Giardia · Adenovirus 40/41 · Norovirus GI/II
H. pylori et facteurs de virulence	Helicobacter pylori · Facteur de virulence babA · Facteur de virulence cagA · Facteur de virulence dupA · Facteur de virulence iceA
Phyla et ratios	Bacteroidetes · Firmicutes · Rapport Firmicutes / Bacteroidetes
Bactéries commensales et clés de voûte	Bacteroides fragilis · Bifidobacterium spp. · Enterococcus spp. · Escherichia spp. · Lactobacillus spp.
Bactéries opportunistes et de surcroissance	Bacillus spp. · Enterococcus faecalis · Enterococcus faecium · Morganella spp. · Pseudomonas spp.

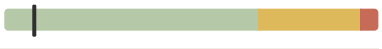
À QUOI RESSEMBLE LE RAPPORT

Les mesures du rapport témoin.

Les valeurs sont fictives et ne proviennent d'aucun patient. Chaque ligne présente une mesure et l'intervalle du laboratoire.

Dans la référence · Proche du seuil · Hors référence

Pathogènes bactériens (copies/g)

Campylobacter (Camp)	< 1,00 × 10³	< 1,00 × 10³	
C. difficile toxine A (Tcd A)	8,50 × 10³	< 1,00 × 10³	
C. difficile toxine B (Tcd B)	6,20 × 10³	< 1,00 × 10³	
E. coli entérohémorragique (EHEC)	< 1,00 × 10³	< 1,00 × 10³	
E. coli O157 (O157)	< 1,00 × 10³	< 1,00 × 10³	
E. coli entéroinvasif / Shigella (EIEC)	< 1,00 × 10³	< 1,00 × 10³	
E. coli entérotoxigène LT/ST (ETEC)	< 1,00 × 10³	< 1,00 × 10³	
E. coli Shiga-like stx1 (stx1)	< 1,00 × 10³	< 1,00 × 10³	
E. coli Shiga-like stx2 (stx2)	< 1,00 × 10³	< 1,00 × 10³	
Salmonella (Sal)	< 1,00 × 10³	< 1,00 × 10³	
Vibrio cholerae (Vch)	< 1,00 × 10³	< 1,00 × 10³	
Yersinia enterocolitica (Yer)	< 1,00 × 10³	< 1,00 × 10³	

Dans la référence · Proche du seuil · Hors référence

Pathogènes parasitaires et viraux (copies/g)

Cryptosporidium (Cry)	< 1,00 × 10³	< 1,00 × 10³	
Entamoeba histolytica (Eh)	< 1,00 × 10³	< 1,00 × 10³	
Giardia (Gl)	< 1,00 × 10³	< 1,00 × 10³	
Adénovirus 40 / 41 (Adv)	< 1,00 × 10³	< 1,00 × 10³	
Norovirus GI / II (NoV)	< 1,00 × 10³	< 1,00 × 10³	

H. pylori et facteurs de virulence (copies/g)

Helicobacter pylori (Hp)	< 1,00 × 10³	< 1,00 × 10³	
Facteur de virulence babA (babA)	N/A	Non détecté	
Facteur de virulence cagA (cagA)	N/A	Non détecté	
Facteur de virulence dupA (dupA)	N/A	Non détecté	
Facteur de virulence iceA (iceA)	N/A	Non détecté	
Facteur de virulence oipA (oipA)	N/A	Non détecté	
Facteur de virulence vacA (vacA)	N/A	Non détecté	
Facteur de virulence virB (virB)	N/A	Non détecté	
Facteur de virulence virD (virD)	N/A	Non détecté	

Dans la référence · Proche du seuil · Hors référence

Phyla et ratios (copies/g)

Bacteroidetes (Bac)	1,20 × 10⁹	1,0 × 10⁹ – 5,0 × 10¹⁰	
Firmicutes (Firm)	9,50 × 10⁸	1,0 × 10⁹ – 5,0 × 10¹⁰	
Ratio Firmicutes : Bacteroidetes (F/B)	0,79	0,5 – 3,0	

Bactéries commensales et clés de voûte (copies/g)

Bacteroides fragilis (Bf)	4,10 × 10⁸	1,0 × 10⁸ – 1,0 × 10¹⁰	
Bifidobacterium spp. (Bif)	8,50 × 10⁸	4,0 × 10⁸ – 4,0 × 10¹⁰	
Enterococcus spp. (Ent)	1,20 × 10⁷	1,0 × 10⁶ – 1,0 × 10⁹	
Escherichia spp. (Esc)	5,40 × 10⁷	1,0 × 10⁶ – 1,0 × 10⁹	
Lactobacillus spp. (Lact)	1,20 × 10⁵	1,0 × 10⁶ – 1,0 × 10⁹	
Enterobacter spp. (Etb)	1,20 × 10⁶	1,0 × 10⁵ – 1,0 × 10⁸	
Akkermansia muciniphila (Akk)	2,30 × 10⁷	1,0 × 10⁵ – 1,0 × 10⁹	
Faecalibacterium prausnitzii (Fp)	1,50 × 10⁸	1,0 × 10⁸ – 1,0 × 10¹⁰	
Roseburia spp. (Ros)	8,40 × 10⁶	1,0 × 10⁶ – 1,0 × 10⁹	

Dans la référence · Proche du seuil · Hors référence

Bactéries opportunistes et de surcroissance (copies/g)

Bacillus spp. (Bac)	< 5,00 × 10⁴	< 5,00 × 10⁴	
Enterococcus faecalis (Ef)	2,10 × 10⁶	< 1,00 × 10⁷	
Enterococcus faecium (Efa)	< 1,00 × 10⁴	< 1,00 × 10⁴	
Morganella spp. (Mor)	< 5,00 × 10³	< 5,00 × 10³	
Pseudomonas spp. (Ps)	< 5,00 × 10³	< 5,00 × 10³	
Pseudomonas aeruginosa (Pa)	< 1,00 × 10³	< 1,00 × 10³	
Staphylococcus spp. (Staph)	< 5,00 × 10³	< 5,00 × 10³	
Staphylococcus aureus (Sau)	< 5,00 × 10³	< 5,00 × 10³	
Streptococcus spp. (Str)	1,40 × 10⁵	< 1,00 × 10⁶	

Méthanogènes et sulfato-réducteurs (copies/g)

Desulfovibrio spp. (Dsv)	1,20 × 10⁵	< 5,00 × 10⁵	
Methanobacteriaceae (Mb)	4,20 × 10⁴	< 5,00 × 10⁴	

Dans la référence · Proche du seuil · Hors référence

Autres bactéries (copies/g)

Citrobacter spp. (Cit)	< 5,00 × 10³	< 5,00 × 10³	
Citrobacter freundii (Cfr)	< 1,00 × 10³	< 1,00 × 10³	
Klebsiella spp. (Kleb)	< 5,00 × 10³	< 5,00 × 10³	
Klebsiella pneumoniae (Kp)	< 5,00 × 10³	< 5,00 × 10³	
M. avium subsp. paratuberculosis (MAP)	< 1,00 × 10³	< 1,00 × 10³	
Proteus spp. (Pro)	< 5,00 × 10³	< 5,00 × 10³	
Proteus mirabilis (Pm)	< 1,00 × 10³	< 1,00 × 10³	
Fusobacterium spp. (Fus)	< 5,00 × 10³	< 5,00 × 10³	
Prevotella spp. (Prev)	2,30 × 10⁶	< 1,00 × 10⁸	

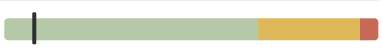
Dans la référence · Proche du seuil · Hors référence

Champignons, levures et autres virus (copies/g)

Candida spp. (Csp)	1,40 × 10³	< 5,00 × 10³	
Candida albicans (Ca)	2,10 × 10³	< 5,00 × 10³	
Geotrichum spp. (Geo)	< 5,00 × 10²	< 5,00 × 10²	
Microsporidium spp. (Msp)	< 5,00 × 10²	< 5,00 × 10²	
Rhodotorula spp. (Rho)	< 5,00 × 10²	< 5,00 × 10²	
Cytomégalovirus (CMV)	< 1,00 × 10²	< 1,00 × 10²	
Virus Epstein-Barr (EBV)	< 1,00 × 10²	< 1,00 × 10²	

Dans la référence · Proche du seuil · Hors référence

Protozoaires (commensaux et potentiellement pathogènes) (copies/g)

Blastocystis hominis (Bh)	$4{,}20 \times 10^3$	$< 2{,}00 \times 10^3$	
Chilomastix mesnili (Cm)	$< 1{,}00 \times 10^2$	$< 1{,}00 \times 10^2$	
Cyclospora spp. (Cyc)	$< 1{,}00 \times 10^2$	$< 1{,}00 \times 10^2$	
Dientamoeba fragilis (Df)	$< 1{,}00 \times 10^2$	$< 1{,}00 \times 10^2$	
Endolimax nana (En)	$< 1{,}00 \times 10^2$	$< 1{,}00 \times 10^2$	
Entamoeba coli (Ec)	$< 1{,}00 \times 10^2$	$< 1{,}00 \times 10^2$	
Pentatrichomonas hominis (Ph)	$< 1{,}00 \times 10^2$	$< 1{,}00 \times 10^2$	

Vers (helminthes) (copies/g)

Ancylostoma duodenale (Ad)	$< 1{,}00 \times 10^2$	$< 1{,}00 \times 10^2$	
Ascaris lumbricoides (Al)	$< 1{,}00 \times 10^2$	$< 1{,}00 \times 10^2$	
Necator americanus (Nec)	$< 1{,}00 \times 10^2$	$< 1{,}00 \times 10^2$	
Trichuris trichiura (Tri)	$< 1{,}00 \times 10^2$	$< 1{,}00 \times 10^2$	
Taenia spp. (Tn)	$< 1{,}00 \times 10^2$	$< 1{,}00 \times 10^2$	

Dans la référence · Proche du seuil · Hors référence

Marqueurs de santé intestinale

Stéatocrite (Sct)	8 %	< 15 %	
Élastase pancréatique 1 (PE-1)	480 µg/g	> 200 µg/g	
Bêta-glucuronidase (β-g)	1300 U/mL	< 2486 U/mL	
Sang occulte (FIT) (FIT)	< 10 µg/g	< 10 µg/g	
IgA sécrétoires (sIgA)	280 µg/mL	510 – 2010 µg/mL	
IgA anti-gliadine (AGA)	8 U/L	< 175 U/L	
Protéine d'activation éosinophilique (EDN)	1,10 µg/g	< 2,34 µg/g	
Calprotectine (Cal)	95 µg/g	< 173 µg/g	

LIRE LE GRAPHIQUE

Lire les mesures.

Chaque résultat se lit avec son unité et son intervalle de référence.

1. **Le nom.** Chaque ligne identifie l'élément, l'organisme, l'hormone ou le composé mesuré.
2. **L'unité.** L'unité précise comment le laboratoire exprime la mesure.
3. **Le résultat.** Cette colonne donne la mesure de l'échantillon transmis.
4. **L'intervalle de référence.** L'intervalle du laboratoire figure à côté du résultat.
5. **Votre bilan écrit.** Vos réponses aux questionnaires et nos échanges par e-mail permettent de préparer votre bilan personnalisé.

VOTRE BILAN INCLUS

Un rapport écrit personnalisé.

Chaque kit Deepcare inclut un bilan personnalisé écrit, préparé à partir de questionnaires, de vos résultats et d'échanges par e-mail.

- Après le paiement, vous recevez un premier questionnaire personnalisé par e-mail.
- Des questions complémentaires arrivent par e-mail ou dans un autre questionnaire si nécessaire.
- Le rapport est rédigé dans votre langue : français, allemand ou anglais.
- Il vous parvient dans les 3 jours ouvrés suivant vos réponses au dernier questionnaire.

> *Un bilan écrit à conserver et à partager avec votre médecin.*

PRÉLÈVEMENT À DOMICILE

Le prélèvement de selles.

Le prélèvement se fait sur une seule journée, le dimanche ou le lundi. Congelez le bloc de gel à l'avance. Gardez l'échantillon au réfrigérateur jusqu'à l'envoi, sans le congeler. Suivez la notice de votre kit.



ÉTAPE 01

Prévoir le prélèvement et l'envoi

Choisissez le dimanche ou le lundi et prévoyez l'envoi dans les 24 heures. Remplissez le formulaire et notez votre nom, la date et l'heure du prélèvement sur le flacon.



ÉTAPE 02

Recueillir un échantillon de selles

Utilisez le bac et le flacon fournis. Respectez le repère de remplissage et les consignes de mélange. Conservez le liquide présent dans le flacon.



ÉTAPE 03

Réfrigérer l'échantillon

Placez l'échantillon dans son sachet et son enveloppe matelassée au réfrigérateur. Seul le bloc de gel se congèle; gardez-le au congélateur jusqu'à l'emballage.



ÉTAPE 04

Expédier dans les 24 heures

Expédiez le jour même si possible. Un prélèvement du dimanche part le lundi. Ajoutez le bloc de gel entièrement congelé au moment de l'emballage. Envoyez le colis au plus tard le mardi avec le matériel fourni.

À PROPOS DE LA MÉTHODE

qPCR chez Diagnostic Solutions.

Diagnostic Solutions Laboratory · qPCR.

Les composés indiqués sont mesurés dans l'échantillon transmis. Les unités et les intervalles du laboratoire accompagnent les résultats.

La page du kit sur deepcare.ch présente la liste complète des marqueurs et les références scientifiques.

LA SUITE

Comment commander

AUJOURD'HUI

Commande sur deepcare.ch

Payez par carte ou TWINT. Vous recevez votre premier questionnaire personnalisé par e-mail.

2 À 3 JOURS OUVRÉS

Envoi du kit

Le kit contient un flacon, un bac de prélèvement, un bloc de gel, la notice et le matériel de retour prépayé.

UNE SEULE JOURNÉE DE PRÉLÈVEMENT

Le prélèvement et l'envoi de l'échantillon

Prélevez le dimanche ou le lundi. Réfrigérez l'échantillon et congelez le bloc de gel. Expédiez dans les 24 heures avec le bloc congelé, selon la notice du kit.

APRÈS LES RÉPONSES AU DERNIER QUESTIONNAIRE

Votre bilan écrit

Il vous parvient dans les 3 jours ouvrés suivant vos réponses au dernier questionnaire.

Commander ce kit

deepcare.ch/fr/kits/gi-map