DEEPCARE

KIT À DOMICILE

Analyse minérale des cheveux

Le laboratoire mesure 39 éléments dans un petit échantillon de cheveux et calcule 5 rapports entre éléments. Vous coupez les cheveux chez vous, les pesez avec la balance fournie et les envoyez à Doctor's Data. Le bilan personnalisé écrit est inclus.

PRIX	DÉLAI	PRÉLÈVEMENT
CHF 219	10 jours	Cheveux · 0,25 g

CE QUE LE KIT MESURE

39 éléments et 5 ratios


Le laboratoire mesure 39 éléments dans un petit échantillon de cheveux et calcule 5 rapports entre éléments. Vous coupez les cheveux chez vous, les pesez avec la balance fournie et les envoyez à Doctor's Data. Le bilan personnalisé écrit est inclus.

Métaux toxiques	Aluminium · Antimony · Arsenic · Barium · Beryllium
Macrominéraux	Calcium · Magnesium · Sodium · Potassium · Phosphorus
Oligoéléments	Copper · Zinc · Manganese · Chromium · Vanadium
Autres éléments	Boron · Lithium · Strontium · Germanium · Rubidium
Rapports entre éléments	Calcium / Magnesium · Calcium / Phosphorus · Sodium / Potassium · Zinc / Copper · Zinc / Cadmium

À QUOI RESSEMBLE LE RAPPORT

Les mesures du rapport témoin.

Les valeurs sont fictives et ne proviennent d'aucun patient. Chaque ligne présente une mesure et l'intervalle du laboratoire.

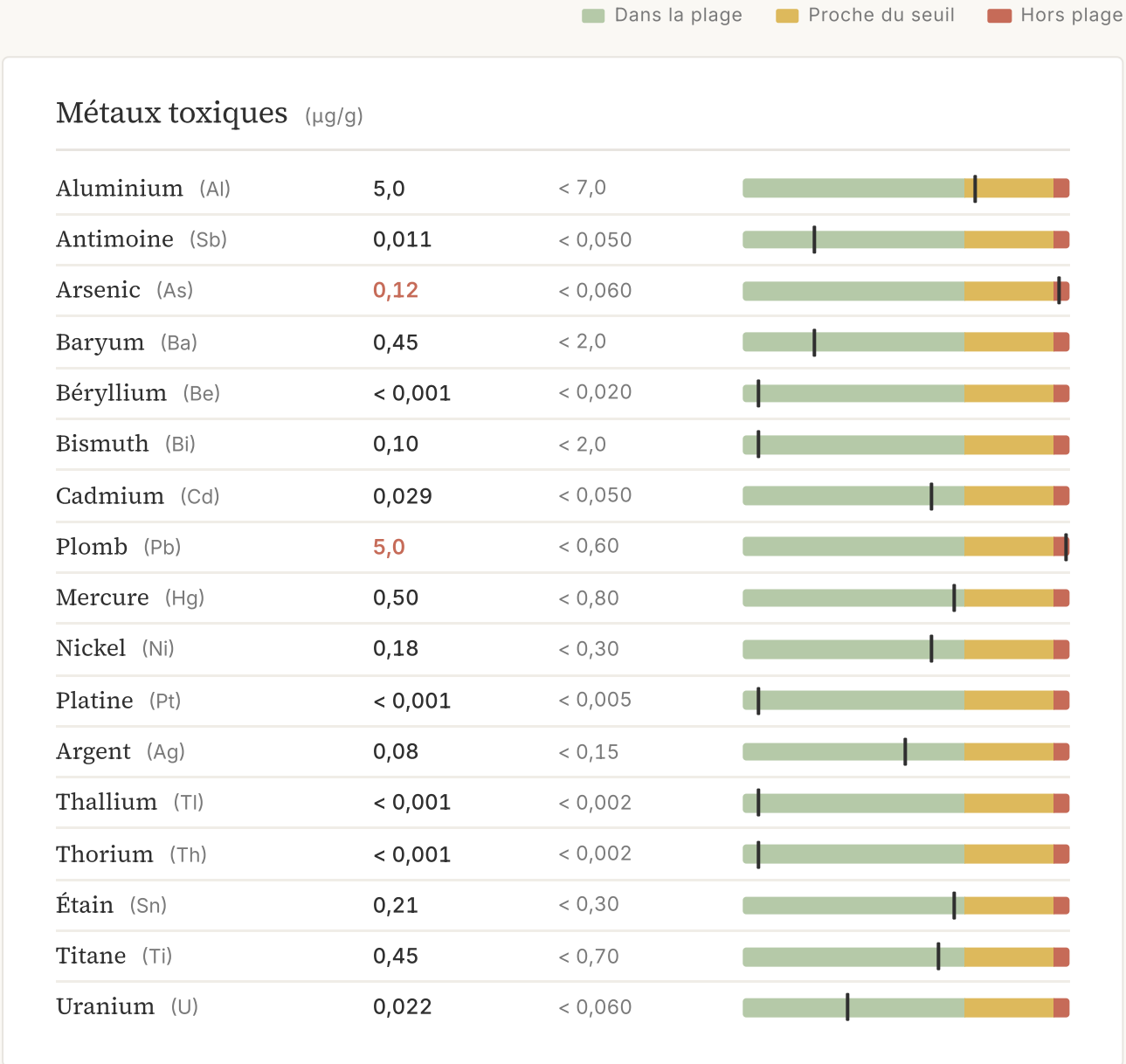

Dans la plage · Proche du seuil · Hors plage

Macrominéraux (µg/g)

Calcium (Ca)	224	300 – 1200
Magnésium (Mg)	21	35 – 120
Sodium (Na)	85	20 – 250
Potassium (K)	24	8 – 75
Phosphore (P)	175	150 – 220
Soufre (S)	47000	44000 – 50000

Oligoéléments (µg/g)

Cuivre (Cu)	74	11 – 37
Zinc (Zn)	180	140 – 220
Manganèse (Mn)	0,22	0,08 – 0,60
Chrome (Cr)	0,52	0,40 – 0,65
Vanadium (V)	0,038	0,018 – 0,065
Molybdène (Mo)	0,032	0,020 – 0,050
Fer (Fe)	10	7,0 – 16
Cobalt (Co)	0,018	0,005 – 0,040
Sélénium (Se)	1,3	0,55 – 1,1
Iode (I)	1,1	0,25 – 1,8

Dans la plage · Proche du seuil · Hors plage

Autres éléments (µg/g)

Bore (B)	0,90	0,25 – 1,5
Lithium (Li)	0,012	0,007 – 0,020
Strontium (Sr)	2,4	0,50 – 7,6
Germanium (Ge)	0,035	0,030 – 0,040
Rubidium (Rb)	0,045	0,007 – 0,096
Zirconium (Zr)	0,11	0,020 – 0,42

Rapports entre éléments

Calcium / magnésium (Ca/Mg)	10,7	4 – 30
Calcium / phosphore (Ca/P)	1,28	1 – 12
Sodium / potassium (Na/K)	3,5	0,5 – 10
Zinc / cuivre (Zn/Cu)	2,4	4 – 20
Zinc / cadmium (Zn/Cd)	6207	> 800

LIRE LE GRAPHIQUE

Lire les mesures.

Chaque résultat se lit avec son unité et son intervalle de référence.

1. **Le nom.** Chaque ligne identifie l'élément, l'organisme, l'hormone ou le composé mesuré.
2. **L'unité.** L'unité précise comment le laboratoire exprime la mesure.
3. **Le résultat.** Cette colonne donne la mesure de l'échantillon transmis.
4. **L'intervalle de référence.** L'intervalle du laboratoire figure à côté du résultat.
5. **Votre bilan écrit.** Vos réponses aux questionnaires et nos échanges par e-mail permettent de préparer votre bilan personnalisé.

VOTRE BILAN INCLUS

Un rapport écrit personnalisé.

Chaque kit Deepcare inclut un bilan personnalisé écrit, préparé à partir de questionnaires, de vos résultats et d'échanges par e-mail.

- Après le paiement, vous recevez un premier questionnaire personnalisé par e-mail.
- Des questions complémentaires arrivent par e-mail ou dans un autre questionnaire si nécessaire.
- Le rapport est rédigé dans votre langue : français, allemand ou anglais.
- Il vous parvient dans les 3 jours ouvrés suivant vos réponses au dernier questionnaire.

> *Un bilan écrit à conserver et à partager avec votre médecin.*

PRÉLÈVEMENT À DOMICILE

Le prélèvement de cheveux.

Utilisez le matériel et le calendrier fournis avec votre kit. Suivez les consignes du laboratoire pour le séchage ou la conservation et le retour.



ÉTAPE 01

Noter les informations demandées

Remplissez le formulaire du laboratoire et étiquetez chaque échantillon avec les informations demandées.



ÉTAPE 02

Couper et peser les cheveux

Prélevez environ 0,25 g de cheveux selon les instructions et utilisez la balance fournie.



ÉTAPE 03

Préparer le retour

Suivez les consignes de séchage, de conservation et d'emballage. Utilisez le matériel de retour fourni.



ÉTAPE 04

Renvoyer au laboratoire

Expédiez les échantillons avec l'étiquette de retour incluse et conservez la référence de l'envoi.

À PROPOS DE LA MÉTHODE

ICP-MS chez Doctor's Data.

Doctor's Data · ICP-MS.

Les composés indiqués sont mesurés dans l'échantillon transmis. Les unités et les intervalles du laboratoire accompagnent les résultats.

La page du kit sur deepcare.ch présente la liste complète des marqueurs et les références scientifiques.

LA SUITE

Comment commander

AUJOURD'HUI

Commande sur deepcare.ch

Payez par carte ou TWINT. Vous recevez votre premier questionnaire personnalisé par e-mail.

---

2 À 3 JOURS OUVRÉS

Envoi du kit

Une petite boîte arrive à votre adresse avec la balance, le formulaire, le sachet refermable, et l'étiquette DHL prépayée pour le retour.

À VOTRE CONVENANCE

Prélever et expédier

Couper, peser, refermer, déposer chez DHL. Dix minutes de votre temps.

APRÈS LES RÉPONSES AU DERNIER QUESTIONNAIRE

Votre bilan écrit

Il vous parvient dans les 3 jours ouvrés suivant vos réponses au dernier questionnaire.

Commander ce kit

deepcare.ch/fr/kits/analyse-minerale-cheveux