
DEEPCARE

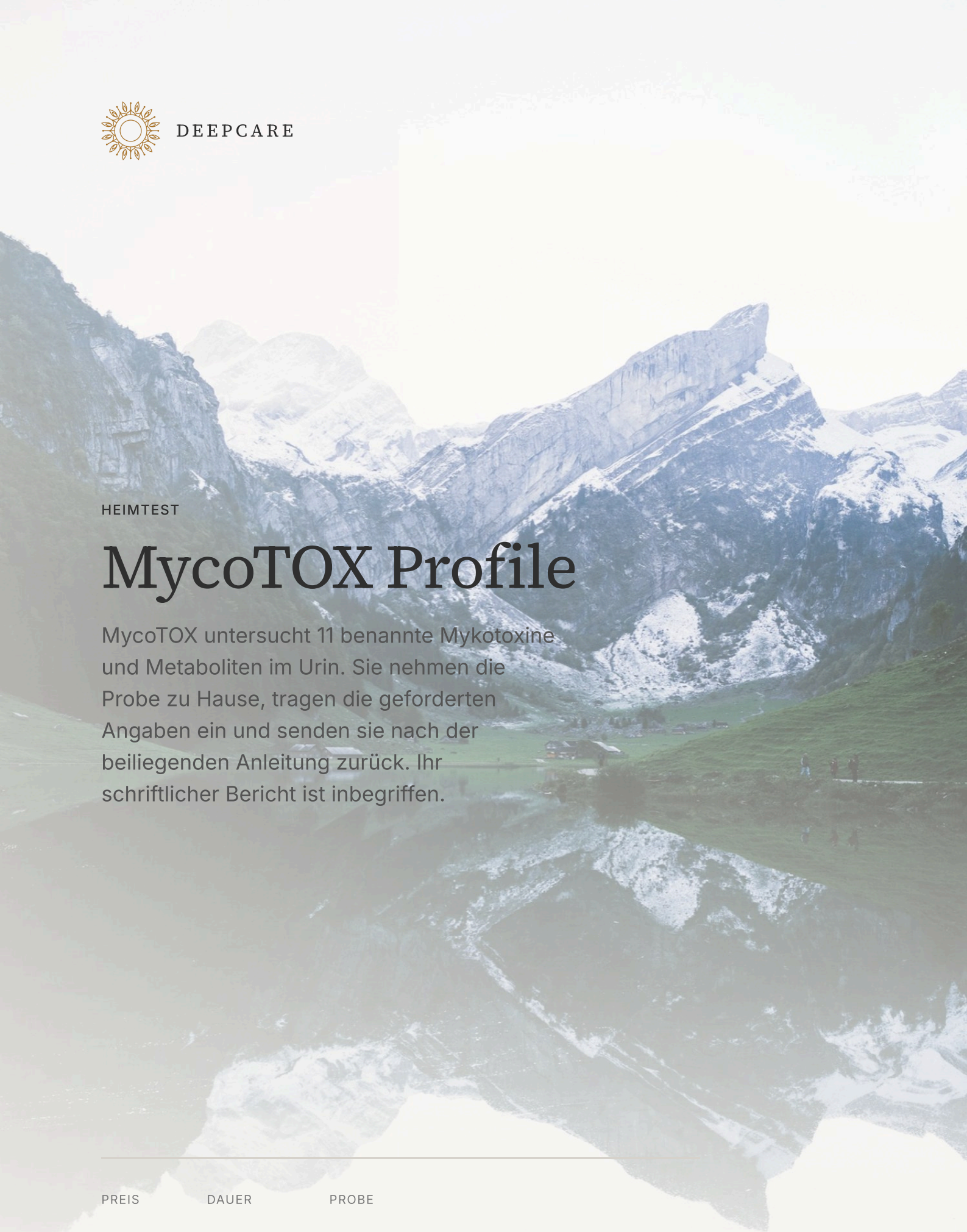

HEIMTEST

MycoTOX Profile

MycoTOX untersucht 11 benannte Mykotoxine und Metaboliten im Urin. Sie nehmen die Probe zu Hause, tragen die geforderten Angaben ein und senden sie nach der beiliegenden Anleitung zurück. Ihr schriftlicher Bericht ist inbegriffen.

PREIS	DAUER	PROBE
CHF 449	14 ±5 Tage	Urin

WAS DAS KIT MISST

11 Mykotoxine

MycoTOX untersucht 11 benannte Mykotoxine und Metaboliten im Urin. Sie nehmen die Probe zu Hause, tragen die geforderten Angaben ein und senden sie nach der beiliegenden Anleitung zurück. Ihr schriftlicher Bericht ist inbegriffen.

Aflatoxine	Aflatoxin M1
Ochratoxine	Ochratoxin A
Trichothecene (Stachybotrys)	Roridin E · Verrucarin A
Zearalenon (Fusarium)	Zearalenon
Weitere Mykotoxine	Chaetoglobosin A · Citrinin / Dihydrocitrinon · Enniatin B · Gliotoxin · MPA (Penicillium)

WIE DER BERICHT AUSSIEHT

Die Messwerte im Musterbericht.

Die Beispielwerte sind synthetisch und stammen von keiner realen Person.
Jede Zeile zeigt einen Messwert und den Vergleichsbereich des Labors.

Unter dem Schwellenwert · Nahe der Schwelle · Über dem Schwellenwert

Die 11 Mykotoxine (ng/g Kreatinin)

Aflatoxin M1 (AFM1)	< 0,50	< 0,50	
Ochratoxin A (OTA)	3,20	< 7,50	
Roridin E (ROE)	< 0,20	< 0,20	
Verrucarin A (VRA)	< 1,30	< 1,30	
Zearalenon (ZEA)	4,40	< 3,20	
Chaetoglobosin A (CHA)	< 10,00	< 10,00	
Citrinin / DH-Citrinin (DHC)	12,00	< 25,00	
Enniatin B (ENB)	< 0,30	< 0,30	
Gliotoxin (GTX)	248,00	< 200	
MPA (Penicillium) (MPA)	< 37,40	< 37,40	
Sterigmatocystin (STC)	< 0,40	< 0,40	

DAS DIAGRAMM LESEN

Die Messwerte lesen.

Zu jedem Ergebnis gehören seine Einheit und sein Referenzbereich.

1. **Der Name.** Jede Zeile benennt das gemessene Element, den Organismus, das Hormon oder die Verbindung.
2. **Die Einheit.** Die Einheit beschreibt, wie das Labor den Messwert angibt.
3. **Der Messwert.** Diese Spalte enthält den Wert der eingesandten Probe.
4. **Der Referenzbereich.** Der Vergleichsbereich des Labors steht neben dem Ergebnis.
5. **Ihr schriftlicher Bericht.** Ihre Antworten und der Austausch per E-Mail bilden die Grundlage für Ihre persönliche Standortbestimmung.

IHR ENTHALTENER BERICHT

Ein persönlicher schriftlicher Bericht.

Jedes Deepcare-Kit enthält eine schriftliche Standortbestimmung auf Grundlage persönlicher Fragebögen, Ihrer Ergebnisse und des Austauschs per E-Mail.

- Nach der Zahlung erhalten Sie den ersten persönlichen Fragebogen per E-Mail.
- Bei Bedarf folgen Rückfragen per E-Mail oder mit einem weiteren Fragebogen.
- Der Bericht wird in Ihrer Sprache geschrieben: Deutsch, Französisch oder Englisch.
- Sie erhalten ihn innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Ihren Antworten auf den letzten Fragebogen.

> *Ein schriftlicher Bericht, den Sie aufbewahren und Ihrer Hausärztin oder Ihrem Hausarzt zeigen können.*

PROBENAHME ZU HAUSE

Ihre Urinprobe entnehmen.

Verwenden Sie das Material und den Entnahmeplan Ihres Kits. Befolgen Sie die Laboranleitung zur Trocknung oder Lagerung und zum Rückversand.



SCHRITT 01

Die Angaben zur Probe eintragen

Füllen Sie das Laborformular aus und beschriften Sie jede Probe mit den geforderten Angaben.



SCHRITT 02

Das Probengefäss verwenden

Verwenden Sie das Uringefäss und befolgen Sie die Entnahmeanleitung im Kit.



SCHRITT 03

Probe und Gelpack einfrieren

Legen Sie die verschlossene Probe und das Gelpack in den verschlossenen Sicherheitsbeutel. Beide müssen vor dem Verpacken und Versand vollständig gefroren sein, in der Regel nach etwa 6 Stunden.



SCHRITT 04

Die Proben ans Labor senden

Sobald beide vollständig gefroren sind, in Thermoumschlag und Karton verpacken. Möglichst bald versenden, vorzugsweise innerhalb von 48 Stunden nach der Probenahme.

ZUR METHODE

LC/MS bei Mosaic Diagnostics.

Mosaic Diagnostics · LC-MS/MS.

Die benannten Verbindungen werden in der eingesandten Probe gemessen. Die Ergebnisse stehen mit den Einheiten und Vergleichsbereichen des Labors im Bericht.

Die Kit-Seite auf deepcare.ch enthält die vollständige Markerliste und die wissenschaftlichen Quellen.

WIE ES WEITERGEHT

So bestellen Sie

HEUTE

Bestellung auf deepcare.ch

Bezahlen Sie mit Karte oder TWINT. Ihren ersten persönlichen Fragebogen erhalten Sie per E-Mail.

2 BIS 3 ARBEITSTAGE

Versand des Kits

Das Kit enthält Probengefäss, Gelpack, Sicherheitsbeutel, Saugeinlage, Thermoumschlag, Anleitung und vorfrankiertes Rücksendematerial.

MORGENPROBE, DANACH MEIST 6 STUNDEN GEFRIERZEIT

Vorbereitung des Versands

Die Entnahme dauert wenige Minuten. Danach die verschlossene Probe und das Gelpack vollständig einfrieren, meist etwa 6 Stunden. Erst dann in den Thermoumschlag verpacken und versenden, vorzugsweise innerhalb von 48 Stunden nach der Probenahme.

NACH DEN ANTWORTEN AUF DEN LETZTEN FRAGEBOGEN

Ihre schriftliche Standortbestimmung

Sie erhalten ihn innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Ihren Antworten auf den letzten Fragebogen.

Dieses Kit bestellen

deepcare.ch/de/kits/mycotox